


# Bear FLEX Needle

ベアーフレックスニードル

～巾着縫合用直針付縫合糸～

## 製品特長

針に特殊加工（柔軟性）を施していますので、巾着縫合器（PSI）から直針を引き出す際、狭い空間での操作がスムーズに行えます。

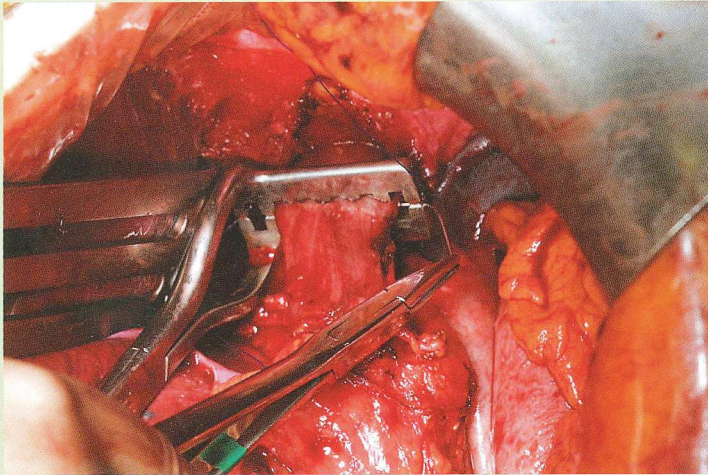


- ★直針先端約10mmは、硬くして刺通性を確保しています。
- ★直針抜去時は容易に針を曲げて引き抜く事が可能で、周囲組織の損傷を防げます。
- ★針と糸はレーザードリルによる加締め穴加工の為、組織損傷が軽減されます。


直針刺入時




直針抜去時

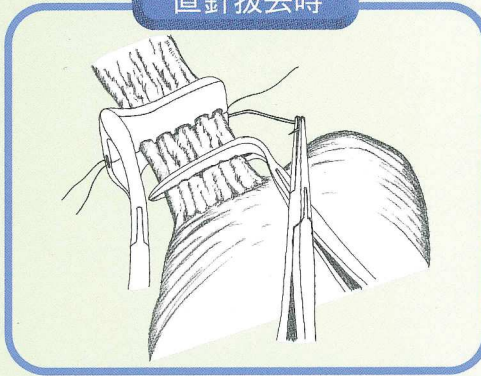


巾着縫合完了時

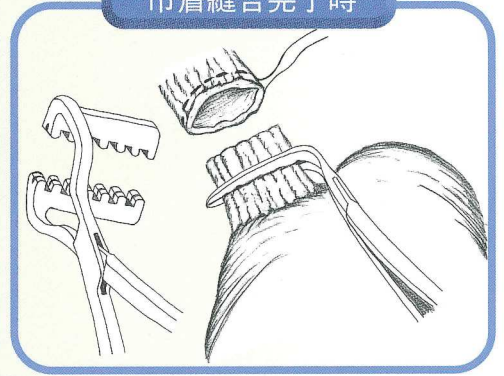

PSIのサイズ（長さ）により針の長さが選択可能です。

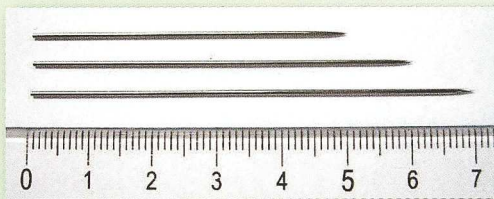

針先端以外は、容易に曲げる事ができます。

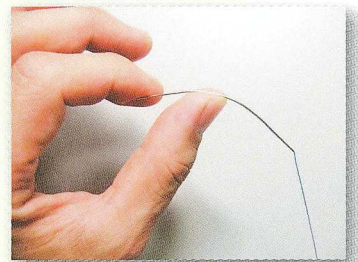

商品内容	商品コード	標準価格
2-0ポリプロピレン、直丸針70mm.両端、針特殊加工	TB-WT70F02M-90	¥18,400
2-0ポリプロピレン、直丸針60mm.両端、針特殊加工	TB-WT60F02M-90	
2-0ポリプロピレン、直丸針50mm.両端、針特殊加工	TB-WT50F02M-90	

1) 1箱20本入り。2) 全て滅菌済です。3) 表示価格は税抜き価格です。 承認番号：16000BZZ01951000

 **株式会社ベアーメディック**

本社工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361  
東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル  
TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042  
その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。  
<http://www.bearmedic.co.jp/>