


multi hand loc system

CM joint set

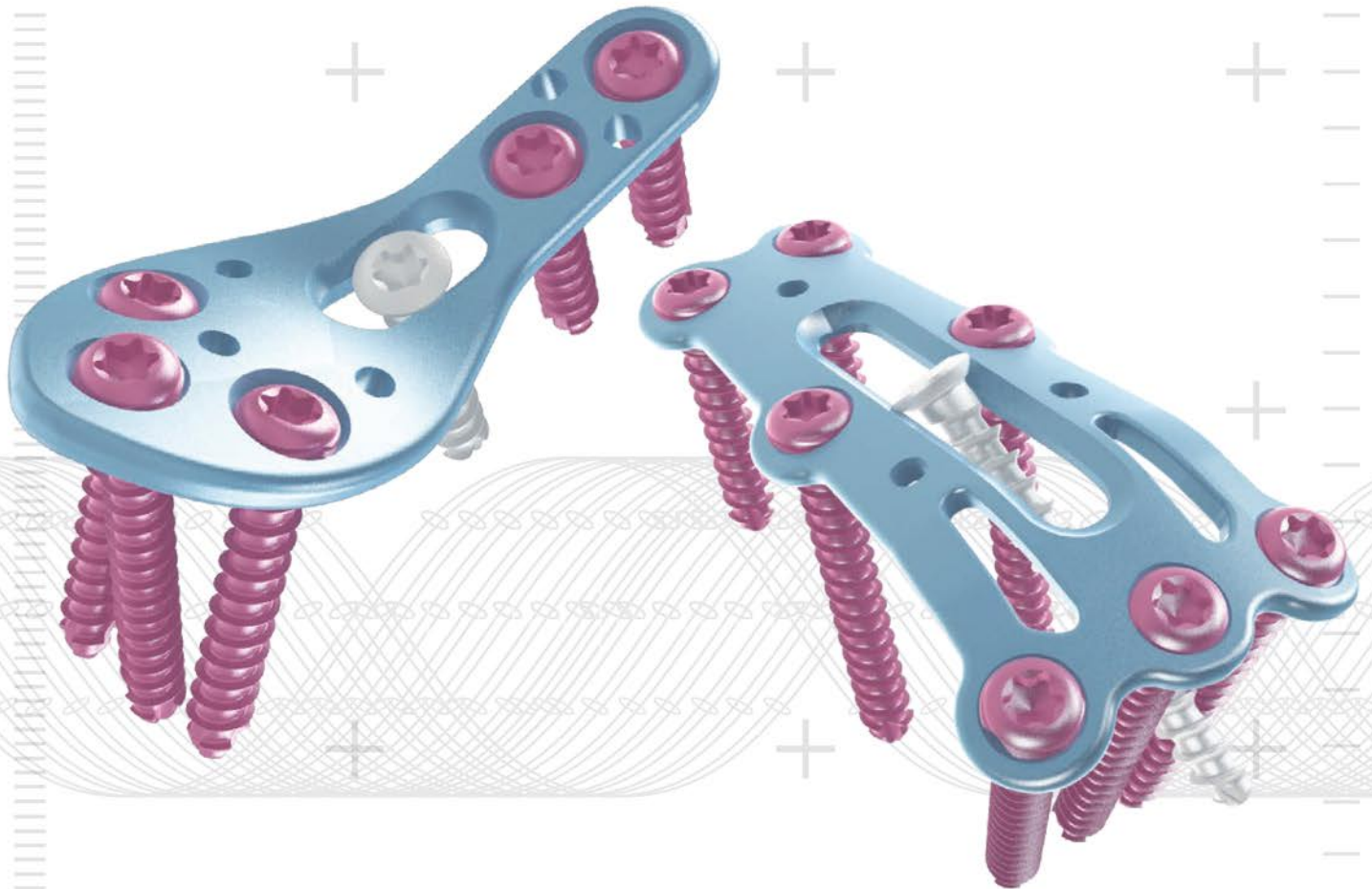


画像提供：しゃもじプレート 溝口外科整形外科病院 小川 光先生
CMFiX®プレート 志木整形外科 加藤 直樹先生

① しゃもじプレート & CMFiX®プレートの標準セット

しゃもじプレート (第1中手骨骨切り術用プレート)と

CMFiX®プレート (母指CM関節固定術用プレート)をセット化しました。

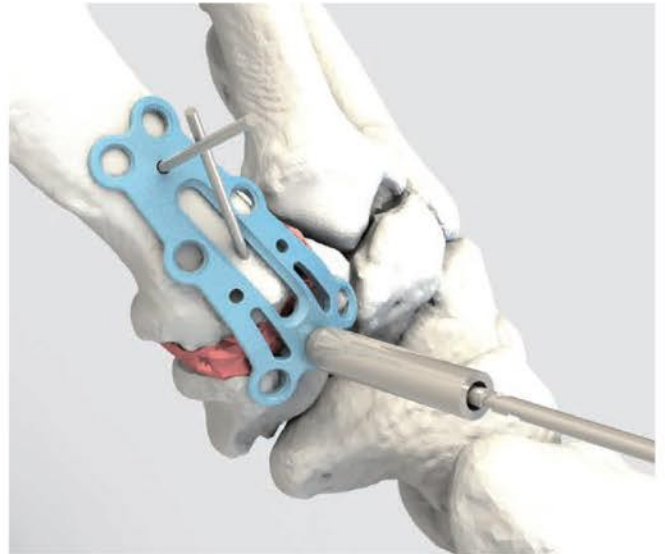

※T型プレートやY型プレートも一緒にセットされています。


② 1mmピッチ (φ2.0mm) のスクリューを標準化

※ロッキングスクリュー、コーティカルスクリュー (3mm～23mm)

※キャニュレイテッドスクリュー (3mm～19mm)

③ 新たにスクリューゲージの追加

術中にスクリュー長の確認が可能です。

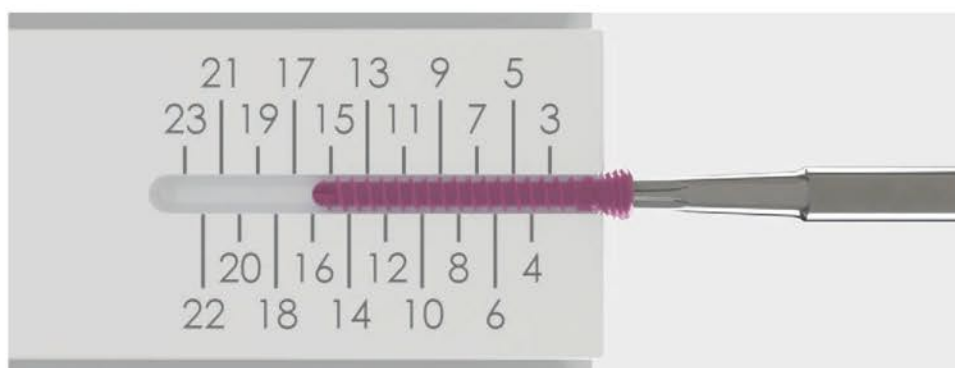

Point

CM joint set multi hand loc system


しゃもじプレート

For JAPANESE

日本人の手の大きさを考慮したデザイン

Pre-Bending Design

中手骨の形状に合わせやすいようにベンディングされた3種類のプレート

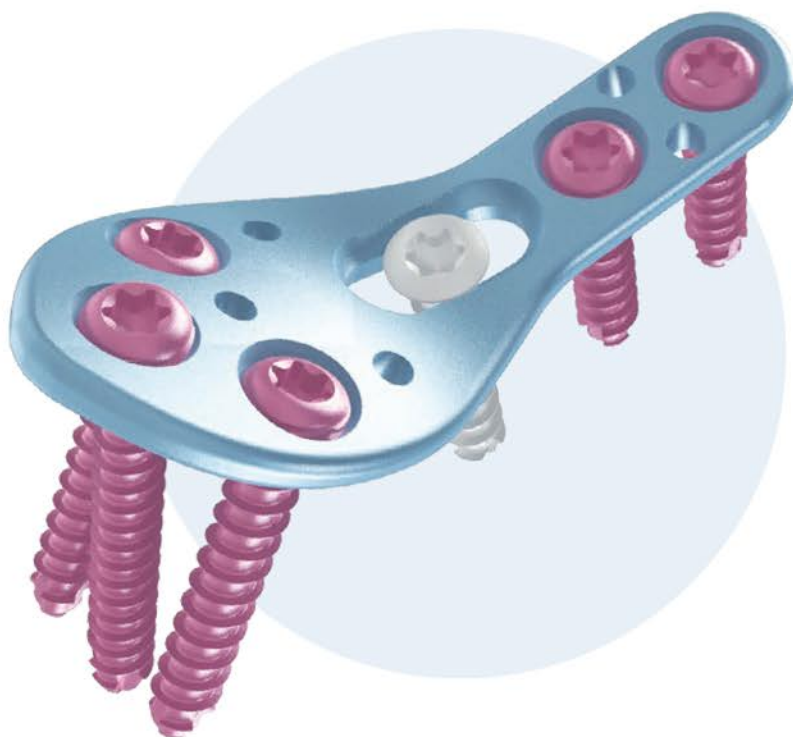

Common Features

Round Edge


伸筋腱への影響を考慮

K-wire Hole

仮固定が可能

Multi-Axial Locking Screw

0°~15°で
スクリュー方向を調整可能

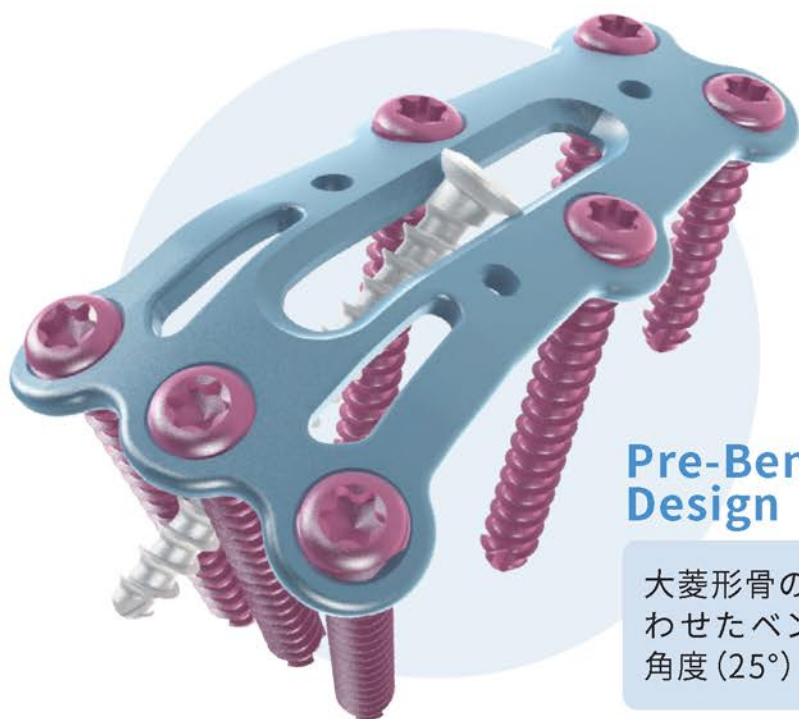

Pre-Bending Design

大菱形骨の形状に合わせたベンディング角度 (25°)

CMFiX®プレート

Adjustable Position (Oval hole)

中手骨と大菱形骨を仮固定したK-wireを設置したままプレート位置を調整可能

Stability for Plate



大菱形骨 (近位) に3本、
中手骨側 (遠位) に4本の
ロックingsクリューの
挿入可能

承認番号: 30300BZX00094000
一般的名称: 体内固定用プレート
販売名: マルチハンドロックシステム


承認番号: 23100BZX00100000
一般的名称: 体内固定用プレート
販売名: マルチハンドシステム2.0/1.5

Variation CM joint set multi hand loc system


しゃもじプレート (t = 1.3mm)

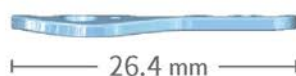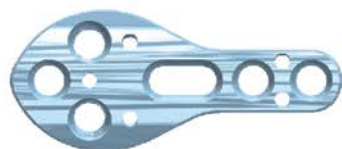


製品番号
MHL-CM1300
製品名
2.0mm用ロッキング第1中手骨用プレート0° 6穴

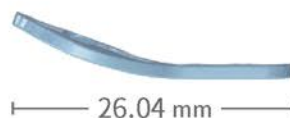


製品番号
MHL-CM1304
製品名
2.0mm用ロッキング第1中手骨用プレート20° 6穴

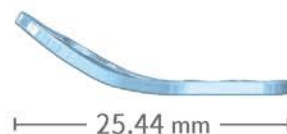


製品番号
MHL-CM1306
製品名
2.0mm用ロッキング第1中手骨用プレート30° 6穴

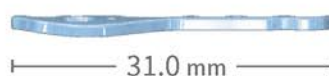

製品番号
MHL-CM1310
製品名
2.0mm用ロッキング第1中手骨用プレート0° 7穴

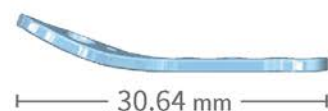


製品番号
MHL-CM1314
製品名
2.0mm用ロッキング第1中手骨用プレート20° 7穴

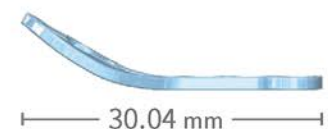

製品番号
MHL-CM1316
製品名
2.0mm用ロッキング第1中手骨用プレート30° 7穴

CMFiX® プレート (t = 1.0mm)

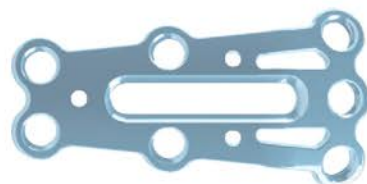

製品番号
MHL-CMF1025
製品名
CMFiXRプレート25°

Y型プレート (t = 1.0mm)



製品番号
MHL-Y1007
製品名
2.0mm用ロッキングY型プレート 12穴

T型プレート (t = 1.0mm)



製品番号
MHL-T1021
製品名
2.0mm用ロッキングT型プレート 3-13穴

T型プレート (t = 1.0mm)



製品番号
MHL-T1014
製品名
2.0mm用ロッキングT型プレート 2-12穴

マトリックスプレート (t = 1.0mm)



製品番号
MHL-SQM1005
製品名
2.0mm用ロッキングマトリックスプレート 2×6穴

スクリュー

スクリューの長さは1mmピッチ



製品番号
TLS2003~TLS2023
製品名
ロッキングスクリュー φ2.0mm × 3mm~23mm



製品番号
TS2003~TS2023
製品名
コーティカルスクリュー(ノンロック) φ2.0mm × 3mm~23mm



製品番号
TCS2003~TCS2019
製品名
キャニュレイテッドスクリュー (ノンロック) φ2.0mm × 3mm~19mm



販売元
株式会社ステラ医療企画
〒262-0033
千葉県千葉市花見川区幕張本郷 2-8-9
TEL : 043-350-0320
<http://www.stellamed.co.jp>



製造販売元
株式会社ベアーメディック
〒113-0034
東京都文京区湯島 2-31-24
TEL : 03-3818-4041
<http://www.bearmedic.co.jp>

